


## MONOFASICO

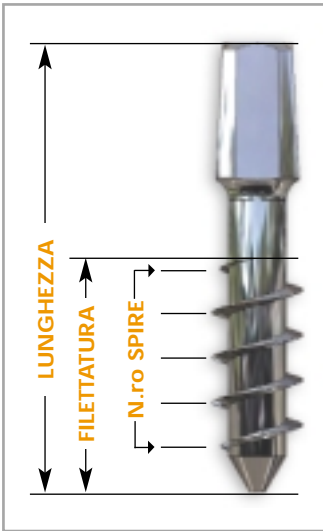

LUNGHEZZA	FILETTATURA	N.ro SPIRE	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
16	6,5	3	IMF-01-001	IMF-02-001	IMF-04-001
18	8,5	4	IMF-01-002	IMF-02-002	IMF-04-002
20	10,5	5	IMF-01-003	IMF-02-003	IMF-04-003
22	12,5	6	IMF-01-004	IMF-02-004	IMF-04-004
24	14,5	7	IMF-01-005	IMF-02-005	IMF-04-005
26	16,5	8	IMF-01-006	IMF-02-006	IMF-04-006
28	18,5	9	IMF-01-007	IMF-02-007	IMF-04-007

### INDICACIONES A EL EMPLEO DE IMPLANTE A TORNILLO MONOFASICA

Los implantes a tornillos monofasica son caracterizados por la presencia de un muñon fresable en el cavo oral y por una geometria de la porción entre el hueso que permite una notable establecida' primaria. Encuentran sobre todo indicación en las situaciones de abundante soporte óseo en vertical. Sus cualidades son una notable comodidad de empleo, un trauma quirúrgico limitado, una notable sencillez de protesizzazione y de los costes contenidos. (La paralelización de los muñones ocurre por pliegue gradual y unidireccional del cuello del implante). El cuello del implante tendrá que ser hundido en el hueso por una profundidad variable en función de la profundidad de la mucosa de modo tal que, por una estética optimal de la prótesis, el fileteado resulta sumergido de unos 1/2 mm. A tal propósito se consulta una medición preventiva de la mucosa con tiente provista de alto endodontico.

### INDICAZIONI ALL'UTILIZZO DELLO STRUMENTARIO PER LA PREPARAZIONE DELL'ALVEOLO CHIRURGICO

FRESA	FRESA	FRESA	FRESA	FRESA	MASCHIATURA **	IMPIANTO
Ø 2,3 mm*	Ø 2,5 mm**	-	-	-	MASCHIATURA **	Ø 3,2 mm
Ø 2,3 mm*	Ø 2,3 mm*	Ø 2,8 mm**	-	-	MASCHIATURA **	Ø 4,0 mm
Ø 2,3 mm*	Ø 2,3 mm*	Ø 2,8 mm*	Ø 3,0 mm*	Ø 3,2 mm**	MASCHIATURA **	Ø 5,0 mm

\* fresa da utilizzare sempre \*\* da utilizzare in caso di osso di durezza elevata

descrizione		descrizione	
	LLAVE MANUAL CON MANGO HEXAGONAL FAL-18-001		LLAVE MANUAL RECTO HEXAGONAL FAL-01-001
	LLAVE MANUAL CON MANGO PARA MUÑON EMERGENTE FAL-18-003		LLAVE MANUAL RECTO PARA MUÑON EMERGENTE FAL-01-003
	LLAVE PARA MICROMOTOR HEXAGONAL FAL-42-002		LLAVE CURVA HEXAGONAL FAL-01-001 AP
	LLAVE PARA MICROMOTOR PARA MUÑON EMERGENTE IMF-11-001		LLAVE CURVA PARA MUÑON EMERGENTE FAL-01-003 AP
descrizione		descrizione	
	ADAPTADOR PARA CRICK CORTO IMF-10-001		CRICK A LEVA CON PROLONGADOR HEXAGONAL FAL-11-001
	ADAPTADOR PARA CRICK MEDIANO IMF-10-002		
	ADAPTADOR PARA CRICK LARGO IMF-10-003		